

## COMMENT PRÉLEVER POUR UNE CYTOMÉTRIE EN FLUX ?

Des prélèvements simples, pour un diagnostic rapide et fiable



### 1. NOEUD LYMPHATIQUE / MASSE

- Aiguille **21G** recommandée
- Pour les prélèvements **du lundi au mercredi** :  
Expulser le matériel dans un **tube neutre**
  - avec **1 mL de sérum**
  - ou 0,2 mL de sérum + 1 mL de solution saline
- Conserver au froid (**4 °C**)
- **Ne pas congeler**



### 2. SANG PÉRIPHÉRIQUE

- Prélever dans un tube **EDTA**
- Réaliser **deux frottis** sanguins
- Conserver au froid (**4 °C**)
- **Ne pas congeler**



### 3. MOELLE OSSEUSE

- Prélever dans un tube **EDTA**
- Réaliser un myélogramme (**2 lames**)
- Conserver au froid (**4 °C**)
- **Ne pas congeler**



### 4. ÉPANCHEMENTS

- Prélever dans un tube **EDTA**
- Conserver au froid (**4 °C**)
- **Ne pas congeler**

### À ÉVITER :

- ✗ Formol
- ✗ Congélation
- ✗ Délai > 48h sans Transfix®
- ✗ Idéalement avant corticothérapie

### À RETENIR



#### CONSERVATION AU FROID

(4 °C, ne pas congeler)



#### ENVOI RAPIDE AU LABORATOIRE HELIANTIX



#### RÉSULTATS SOUS 48 H

après réception

### POUR LES TRANSPORTS > 48 H à partir du jeudi

DEMANDER VOTRE TUBE TRANSFIX®  
au laboratoire Heliantix  
(+20 € / tube)



SELAS HELIANTIX  
10 allée Aristide Maillol  
31770 Colomiers



05 61 26 49 68



contact@heliantix.fr



www.heliantix.com

Scannez ici



Et téléchargez la  
plaquette, les guides et le  
formulaire de demande  
d'analyse

## QUAND DEMANDER UNE CYTOMÉTRIE EN FLUX ?

Les principales indications en pratique clinique



**ADÉNOMÉGALIE - MASSE  
EPANCHEMENTS**



Différencier lymphome /  
prolifération lymphoïde  
réactionnelle



**PRONOSTIC - ORIENTATION  
THÉRAPEUTIQUE - BILAN  
D'EXTENSION LYMPHOME**



Typage B/T  
Facteurs pronostiques  
(Ki-67, MHC II)  
Mise en évidence de cellules  
tumorales dans la moelle



**MASSE MÉDIASTINALE**



Différencier thymome /  
lymphome médiastinal



**LYMPHOCYTOSE  
LEUCÉMIE SUSPECTÉE**



Différencier lymphocytose  
réactionnelle / leucémie  
chronique  
Typage lignée (lymphoïde /  
myéloïde)  
Aiguë vs chronique



**SUIVI THÉRAPEUTIQUE**



Détection précoce des  
réchutes  
(suivi maladie résiduelle)




**DIAGNOSTIC RAPIDE**  
Résultat **sous 48 h**  
après réception



**PEU INVASIF**  
Prélèvements  
simples



**INTERPRÉTATION  
SPÉCIALISÉE**  
Par des vétérinaires  
spécialistes

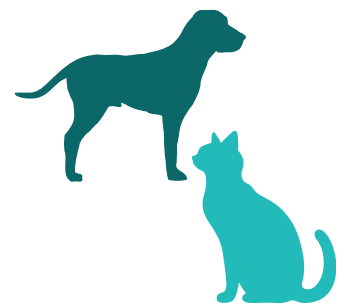

SELAS HELIANTIX  
10 allée Aristide Maillol  
31770 Colomiers



05 61 26 49 68



contact@heliantix.fr



www.heliantix.com

Scannez ici



Et téléchargez la  
plaquette, les guides et le  
formulaire de demande  
d'analyse